

eXeter™

Everyday... a better day.



เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์และคู่มือการใช้งาน

Exeter Thermo Pad


แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โมแพด



เพื่อความปลอดภัยควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
SAVE THESE INSTRUCTIONS, READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
ช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์
ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนใช้

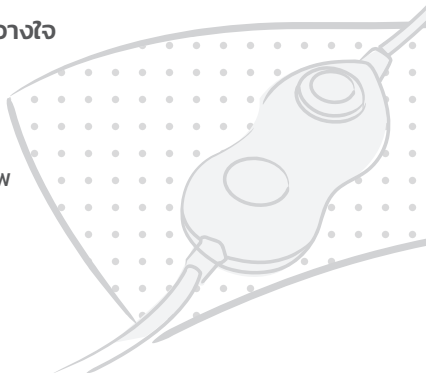

สารบัญ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์	1
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	1
วัตถุประสงค์หรือข้อบ่งใช้	2
วิธีการใช้งาน	3
ช่องทางการติดต่อ	4
วิธีการเก็บรักษา	5
คำเตือนและข้อควรระวังในการใช้เครื่อง	6
เงื่อนไขการรับประกัน	7

1. เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์


รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหินแร่ธรรมชาติ (Bio-Stone) ภายในแผ่น และผ้าคลุมแผ่นเคลือบด้วยจุดไบโอเซรามิก ช่วยกระจายความร้อนได้ดี สามารถควบคุมความร้อนได้ด้วยรีโมทคอนโทรล


2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ในกล่องประกอบด้วย

1. แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กเตอร์ เทอร์โมแพด ซึ่งมีสวิตช์สำหรับปรับอุณหภูมิ
 2. ถุงผ้าฝ้าย สำหรับใส่แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กเตอร์ เทอร์โมแพด
- ในขณะที่ใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
- ภายในประกอบด้วยฉนวนความร้อนและหินแร่ธรรมชาติ (Bio Stone) ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดกลืนและกระจายรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนไปยังส่วนประกอบภายในที่เป็นหิน Quartz Porphyry ซึ่งเป็นหินบำบัดที่ใช้ในการบำบัดดั้งเดิมของชาวเกาหลี
 - ห่อหุ้มด้วยผ้าฉนวนหุ้ม ซึ่งด้านหนึ่งหนากว่าอีกด้านหนึ่ง ส่งผลให้แผ่นความร้อนด้านหนึ่งร้อนกว่าอีกด้านหนึ่ง (สังเกตได้จากด้านที่ร้อนคือด้านที่มีป้ายข้อควรระวัง) เป็นผลดีในเรื่องของการเก็บความร้อนได้ดีขึ้น โดยขณะใช้งานแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กเตอร์ เทอร์โมแพด ด้านที่ร้อนจะสัมผัสกับผิว

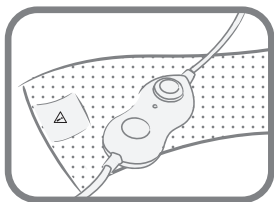

ด้านที่ร้อนมากกว่า
(มีป้ายข้อควรระวัง)

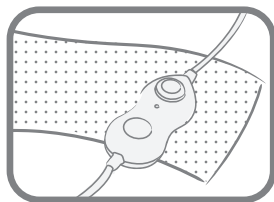

ด้านที่ร้อนน้อยกว่า

3. วัตถุประสงค์หรือข้อบ่งใช้

1. บรรเทาอาการปวด
2. เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่
3. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการรับรู้ความรู้สึกทางผิวหนังบวมพร่องหรือเสียไปและผู้ที่มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกทางผิวหนัง
4. ห้ามใช้กับบริเวณต่างๆ ของร่างกายในช่วงเวลาเดียวกันเนื่องจากจะทำให้เกิดสภาวะความดันโลหิตต่ำลงและความมึนเพื่อมากขึ้นอันจะทำให้ร่างกายมีการขับเหงื่อออกมากและเกิดภาวะการสูญเสียน้ำได้
5. ห้ามใช้กับบริเวณของร่างกายที่มีการอักเสบติดเชื้อ บริเวณที่มีแผลติดเชื้อหรือแผลเปิด
6. ห้ามใช้ขณะนอนหลับ
7. ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี
8. ห้ามใช้กับผู้ที่มีผลเสีย

ข้อควรระวัง

1. ผู้ที่มีเนื้องอก (tumor) หรือวัณโรค (tuberculosis)
2. หญิงมีครรภ์
3. ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory dysfunction) เช่น เส้นเลือดขอด (varicose vein) ผู้ที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำ (thrombophlebitis)

4. วิธีการใช้งาน

1. ตรวจสอบสภาพเบื้องต้น

ตรวจสอบปุ่มหมุนเปิด / ปิด ให้อยู่ที่ตำแหน่ง "STANDBY"

2. บรรจุแผ่นให้ความร้อนในถุงผ้าฝ้าย

3. วางแผ่นให้ความร้อนบนร่างกาย

ตรงบริเวณจุดที่ปวด

4. เสียบสายไฟฟ้าเข้ากับไฟบ้าน

กระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

5. หมุนสวิตช์จากตำแหน่ง "STANDBY"

ไปยังตำแหน่ง "LOW" ระบบจะเริ่มทำงาน จะมีไฟสีเขียวเกิดขึ้น แผ่นให้ความร้อนจะเริ่มทำงาน โดยค่อยๆ มีความร้อนเข้าสู่แผ่นให้ความร้อน

6. ผู้ใช้แผ่นให้ความร้อนสามารถปรับแรงความร้อน

ของแผ่นให้ความร้อนให้ร้อนเร็วหรือช้าได้โดย

หมุนสวิตช์ปรับความร้อน ซึ่งมีสัญลักษณ์

โดยหากต้องการให้แผ่นให้ความร้อน

ร้อนเร็วขึ้น ให้หมุนสวิตช์ปรับความร้อนไปที่ตำแหน่ง "HIGH" ประมาณ


5-10 นาที แล้วหมุนสวิตช์กลับไปที่ตำแหน่ง "LOW" แต่หากต้องการให้

แผ่นให้ความร้อนค่อยๆ เพิ่มความร้อนช้าๆ ให้หมุนสวิตช์ปรับความร้อนไปที่ตำแหน่ง "LOW" ตั้งแต่เริ่มต้น

7. ควรใช้วันละ 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที

8. เมื่อจะเลิกใช้งาน ให้หมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "STANDBY" แผ่นให้ความร้อน

จะหยุดทำงาน ไฟสีเขียวจะดับและให้ถอดปลั๊กออกจากไฟบ้าน

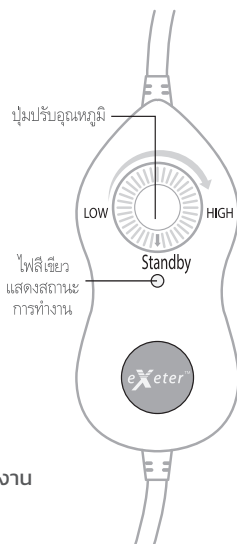

สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 55-85°C

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องและความต้องการของผู้ใช้งาน



คำเตือน!

เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน ควรสวมแผ่นความร้อนไฟฟ้า
ด้วยซองผ้า Cotton ที่ให้มาด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ

1. ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีถ้าเกิดอาการเจ็บหรือผิดปกติ
2. กรุณาศึกษาคู่มือให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

5. ซื่อที่อยู่ (ช่องทางการติดต่อ)


บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ


กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-018-2100


6. วิธีการเก็บรักษา

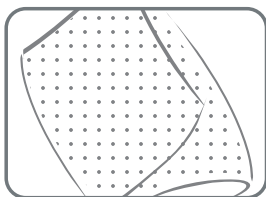


1. พับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน
โดยพับตามรอยขนาน
ห้ามพับทะแยงมุม

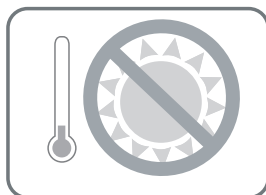

2. เก็บไว้ในที่แห้ง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %RH
และ อุณหภูมิห้องปกติ ($30 \pm 5^{\circ}\text{C}$)
และไม่ถูกแสงแดด

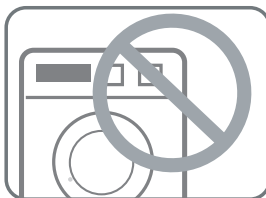

3. ห้ามซัก
ห้ามทำความสะอาด
แผ่นให้ความร้อน

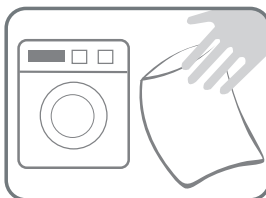

4. ถูผ้าฝ้าย
สามารถถอดซักได้

7. คำเตือนและข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

คำเตือน!

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. อาจทำให้เกิดอาการช็อค / หมดสติจากการทำงานผิดปกติของเครื่อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า
3. อาจก่อให้เกิดการไหม้ (Burn) ของผิวหนังของผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอหรือจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือจากการใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยก่อนใช้รวมทั้งควรกำหนดเวลาในการใช้งานด้วย
4. ไม่ควรใช้แผ่นความร้อนไฟฟ้าเกินครั้งละ 30 นาที ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หากจำเป็นต้องใช้หลายครั้งในหนึ่งวัน ควรเว้นระยะห่างกัน 2 ชั่วโมง และไม่ควรใช้งานเกิน 3 ครั้งต่อวัน เมื่อใช้ความร้อนประคบแล้ว ควรอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติที่ไม่หนาวเกินไประยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวกลับ

ข้อควรระวัง

1. อย่าแยกส่วนหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด
2. ให้งดใช้แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าหากพบร่องรอยความเสียหาย
3. การใช้แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า ควรใช้ต่อครั้งไม่เกิน 30 นาที
4. ห้ามนำแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าไปวางใกล้สิ่งของมีคม
5. ห้ามนำแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าไปไว้ที่มีความร้อนสูง เช่น เบลวไฟ หรือเตารีด
6. ห้ามใช้เบ้มกขัดโลหะขัดผ้ากับแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า
7. ห้ามเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดเวลาและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
8. ห้ามนำแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าแช่น้ำหรือใช้ของเหลวทำให้แผ่นเปียก
9. ห้ามนั่งทับแผ่นหรือพับรัดแผ่นในระหว่างใช้งาน

8. เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วน ภายในระยะเวลาประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง (ถ้ามี)

ระยะเวลาประกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โมแพด
รับประกันคุณภาพแผ่นให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 2 ปี

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจาก :

1. การใช้งานที่ผิดวิธี ขาดการดูแลรักษาเครื่องหรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ อย่างเคร่งครัด การเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
2. อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ได้รับการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากบุคคลอื่น ที่มีใช้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
3. ความสึกหรอของชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองจากการใช้งานตามปกติ
4. ในกรณีที่บัตรรับประกันมีรอยขีด ลบ ชัดฆ่า
5. ในกรณีที่สติ๊กเกอร์หมายเลขเครื่อง (Serial Number) สูญหาย ถูกทำลาย หรือมีรอยแก้ไข
6. ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน หรือไม่มีบัตรรับประกันที่ถูกต้อง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความคุ้มครองการรับประกันให้ตามความเหมาะสม



Everyday... a better day.